

MASCARILLA KN95 FFP2

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Mascarillas ligeras con interior resistente y fácil de llevar. Indicadas para la protección básica respiratoria frente a partículas, aerosoles líquidos con base oleíca y no oleíca. No protegen frente a gases ni vapores químicos.

Protege a los demás ya que están diseñadas para filtrar las partículas emitidas por el usuario durante la respiración, impidiendo que lleguen al exterior, así como de las partículas de exterior.

Las mascarillas KN95 son equivalentes a las mascarillas FFP2.

La mascarilla FFP2 es uno de los modelos de máscara protectora autofiltrante de tipo desechable que sirve para filtrar el 94 % de las partículas del aire, según las normas europeas EN 143 y EN 149. Se utilizan en la industria y como respiradores/máscarillas quirúrgicas sanitarias y hospitalarias, así como en epidemias para evitar enfermedades contagiosas e intrahospitalarias.


Se usa para evitar contagios de agentes patológicos de influenza (influenzavirus A), influenzavirus B, gripe aviaria, coronavirus, (MERS-CoV, SARS-CoV [SRAS], SARS-CoV-2 [COVID-19], Yersinia pestis y tuberculosis.



MASCARILLA KN95 FFP2

DATOS TÉCNICOS

MEDIDAS

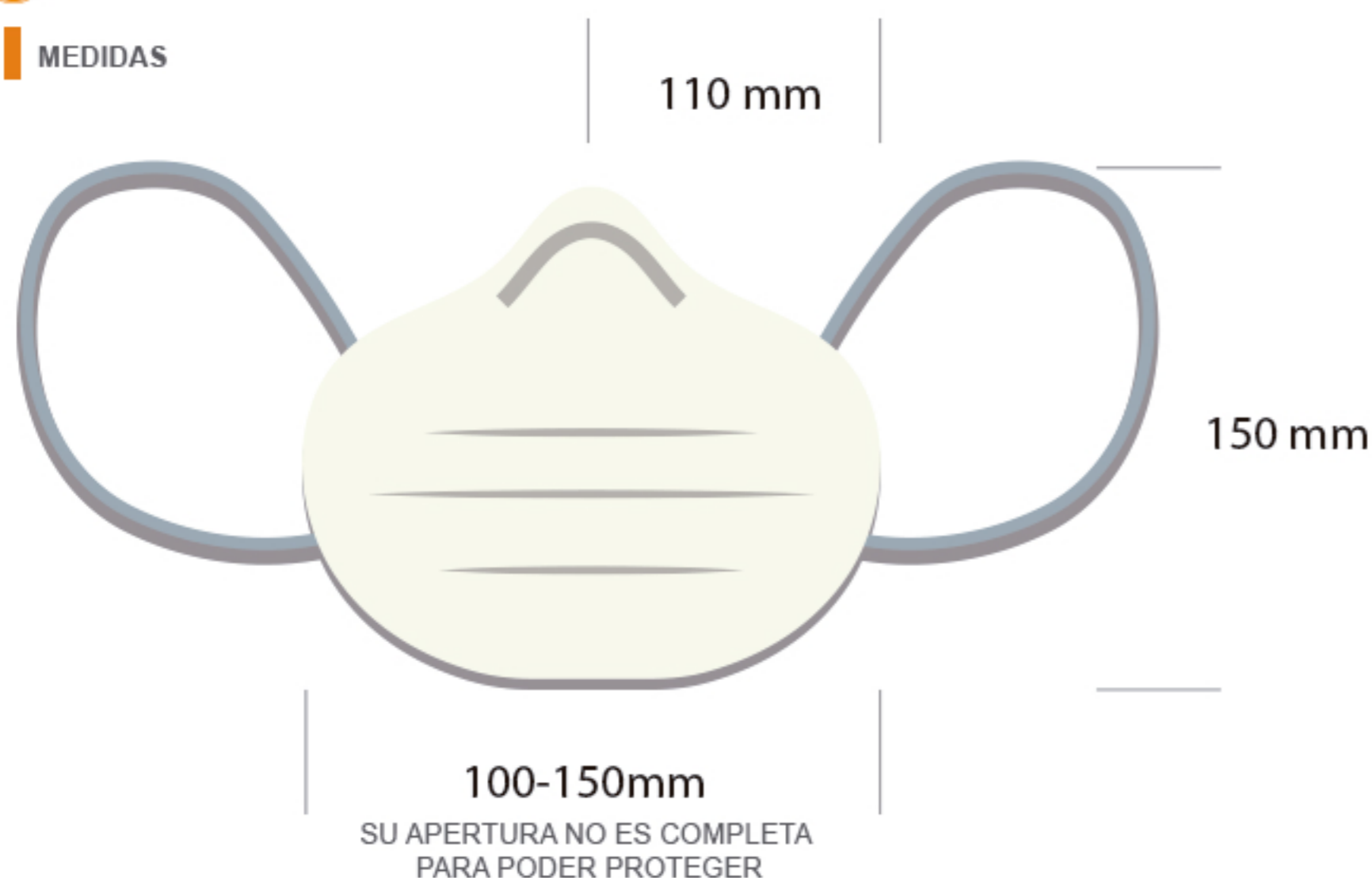

MODELOS

**MASCARILLAS KN95
FFP2**
COD:0042


Mascarillas KN95:

- Peso ligero
- Fácil para respirar
- Libre de fibra de vidrio
- Barra nasal adaptable para un ajuste perfecto y mayor comodidad.
- Color blanco
- Clase de protección: KN95/FFP2
- No reutilizable

Resistencia a la Respiración:

- Inhalación: ≤ 350 Pa
- Exhalación: ≤ 250 Pa
- Eficiencia en el filtrado: $\geq 95\%$ (partículas $0.3\mu\text{m}$)

USO DEL PRODUCTO

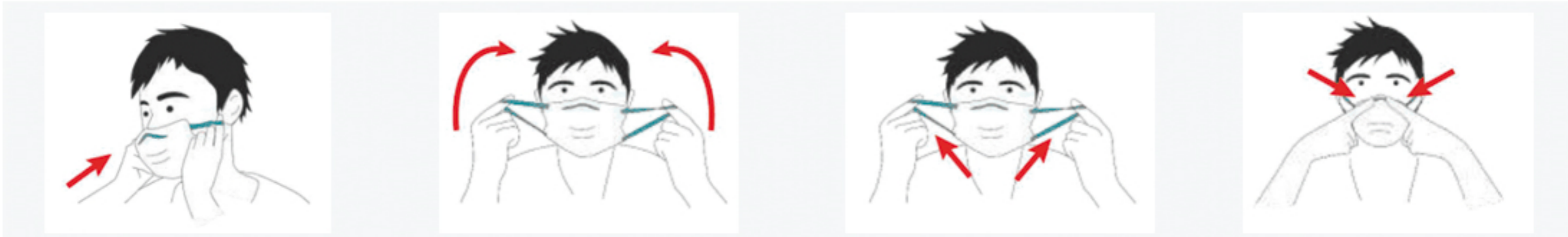

Se deben tomar ciertas precauciones a la hora de colocar una mascarilla quirúrgica o de protección. Entre ellas:

- Sacar la mascarilla del envase y ajustarla a la cara sujetándola únicamente a través de las cintas.
 - Respetar la dirección de colocación, con el adaptador a la altura de la nariz. Por lo general, la información impresa por el fabricante en la Mascarilla debe quedar en la parte exterior. Si no hay indicaciones específicas, el lado más acolchado será el que esté en contacto con la cara.
 - Colocar las cintas superiores alrededor de la cabeza y las cintas inferiores a la altura de la nuca.
- La mascarilla debe estar completamente desplegada.
- La mascarilla debe cubrir la nariz, la boca y la barbilla. En el caso de las mascarillas de protección, se puede comprobar que la mascarilla está correctamente ajustada bloqueando el filtro e inhalando lentamente a continuación. Si la mascarilla se ciñe a la cara, significará que está bien colocada y que no hay escapes.
 - Una vez que la mascarilla esté ajustada, no deberá manipularse ni reajustarse.
 - Las mascarillas de un solo uso, una vez retiradas, deben desecharse y someterse al procedimiento de eliminación adecuado.
 - Las mascarillas deben cambiarse regularmente: las mascarillas quirúrgicas al menos una vez cada tres horas antes si presenta salpicaduras, y las mascarillas de protección pasadas entre tres y ocho horas.
 - Lavarse las manos antes y después de cada cambio de mascarilla.